


Mode d'emploi court pour les sécurités médianes

ZK-969/3, ZP-3067/2, ZK-969/2, ZP-3067, ZK-969, ZP-1069 pour les lits à partir de mi-2003

VÖLKER


A **Hilti** Rom Company

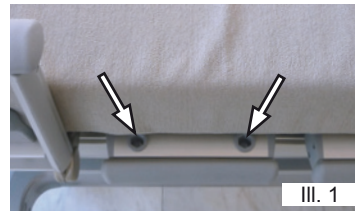

Les sécurités médianes obturent l'intervalle central situé entre les barrières latérales des lits Völker afin de créer une barrière latérale longue.

Relever les barrières latérales

1. Relevez premièrement les barrières latérales du lit. Pour ce faire, veuillez observer les remarques figurant dans le manuel d'utilisation ou le mode d'emploi court.

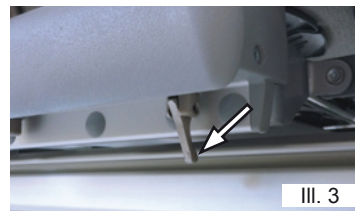

Mettre la sécurité médiane en place

1. Insérez les broches de la sécurité médiane dans les douilles d'insertion situées au milieu du sommier (ill. 1). Veillez à ce que la sécurité médiane recouvre les barrières latérales du côté extérieur (ill. 2).
2. Vérifiez que le verrouillage pendulaire soit enclenché correctement jusqu'au bout en essayant d'enlever la sécurité médiane en la tirant vers le haut. Si cela s'avère possible, abaissez de nouveau entièrement la sécurité médiane puis ajustez le pendule jusqu'à ce que la sécurité médiane ne puisse plus être soulevée (ill. 3).

Retirer la sécurité médiane

1. Pour retirer la sécurité médiane du support, mettez le pendule en position verticale et tirez en même temps la sécurité médiane vers le haut (ill. 3).



ATTENTION Assurez-vous que les barrières latérales - ou leurs éléments - sont entièrement relevées et enclenchées. Lors de l'actionnement du réglage motorisé du plan de couchage ou des barrières latérales, il convient de veiller à ce que le résident/patient n'ait aucun contact avec les barrières latérales, et à ce qu'aucun membre ne dépasse des barrières latérales. Il est vivement conseillé de verrouiller les fonctions de la télécommande.

REMARQUE Veuillez observer les remarques figurant dans le manuel d'utilisation détaillé du lit !